

Tekstylia medyczne wielokrotnego użytku



O NAS



Garmex jest polskim wytwórcą szerokiego asortymentu wyrobów tekstylnych stosowanych w szpitalach i innych jednostkach służby zdrowia. W 2005 roku wprowadziliśmy na polski rynek barierową bieliznę operacyjną wielokrotnego użytku, spełniającą wymagania dyrektywy MDD 93/42 oraz normy zharmonizowanej PN-EN 13795. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów wyeliminowaliśmy tradycyjną bawełnę, jako tkaninę niosącą za sobą ryzyko powstawania zakażeń szpitalnych, a także stworzyliśmy konkurencyjną alternatywę dla wyrobów jednorazowego użytku.



Dzisiejsze czasy, to czasy dbałości o środowisko naturalne i dążenie do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności niebezpiecznych, jakimi są odpady medyczne. Jesteśmy pewni, że dokonaliśmy właściwego wyboru, tworząc ofertę barierowych wyrobów wielokrotnego użytku. Lata doświadczeń, współpraca z wiodącymi producentami tkanin oraz stały nadzór jakościowy nad wprowadzanymi do obrotu wyrobami, stawia nas w roli lidera wśród firm operujących na rynku.



Po odniesieniu niekwestionowanego sukcesu w obszarze szpitalnych bloków operacyjnych oraz w odpowiedzi na zapytania płynące z innych obszarów funkcjonowania jednostek służby zdrowia rozszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne grupy asortymentowe, dbając nadal o dotrzymanie standardów jakościowych. Właśnie z tego powodu nasze produkty spełniają rygorystyczne kryteria normy CEN/TS 14237 traktującej o wymaganiach postawionych tekstyliom stosowanym w służbie zdrowia.



Doświadczona załoga, nowoczesny park maszynowy, śledzenie trendów światowych powodują, że dostarczamy produkty wysokiej jakości, spełniające często bardzo szczegółowe wymagania naszych Odbiorców. W sposób szczególny dbamy o właściwą obsługę naszych Klientów, ponieważ tylko dzięki interakcji jesteśmy w stanie tworzyć optymalne rozwiązania.

www.garmex.pl

4	ODZIEŻ OPERACYJNA
7	OBUWIE OPERACYJNE
8	FARTUCHY OPERACYJNE
10	OBŁOŻENIA OPERACYJNE
12	ODZIEŻ FASONOWA
16	KOSZULE I PIŻAMY DLA PACJENTÓW
18	POŚCIEL SZPITALNA I KOCE
20	POKROWCE I PODKŁADY
22	WORKI NA BIELIZNĘ



MEDITEX

Odzież operacyjna
wielokrotnego użytku



Dzięki zastosowanej tkaninie odzież operacyjna wielokrotnego użytku Meditex zapewnia użytkownikom najwyższy poziom komfortu i bezpieczeństwa.

Meditex:

Wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej w pełni spełniającej normę PN-EN 13795

Właściwości:

Niska waga, brak pylenia, ochrona przeciw drobnoustrojom, wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci, wysoki poziom przepuszczalności powietrza, wysoki poziom chłonności i szybkie schnięcie, długa żywotność i wytrzymałość, miła w dotyku, porównywalna z bawełną, zapewnia maksimum komfortu i bezpieczeństwa dla użytkownika.

Meditex utrzymuje poziom pylenia wymagany normą PN-EN 13795 przez ponad 200 cykli prania i suszenia.

Fasony:

- zestaw: bluza i spodnie
- zestaw: bluza i spódnica
- sukienka

Rozmiary:

XS - 5XL

Kolory:





Ubrania Meditex charakteryzują się niskim poziomem kurczliwości i wysokim poziomem odporności na odbarwienia.



Szeroka paleta kolorów pozwala na dedykowanie ubrań do poszczególnych oddziałów i ułatwia ich rozróżnienie nawet u największych klientów.



► **różne kolory lamówek i troków**
ułatwiający identyfikację odpowiedniego rozmiaru

► **haft lub nadruk**
czyli personalizacja na życzenie klienta



MEDICAP

Czepki operacyjne

Czepki wykonane z bezpyłowej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Wyposażone są w wysokochłoną taśmę przeciwpotną.

Rozmiary:

płaski - męski
głęboki - damski

Kolory:



OBUWIE operacyjne

Buty operacyjne Falcon

Wykonane z wysokoelastycznego tworzywa SEBS, odpornego na działanie detergentów, środków dezynfekcyjnych i wody. Obuwie jednorodne, wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia, nietężone, nieprzemakalne, nienasiąkliwe. Antystatyczne i antypoślizgowe. Bez wkładki wewnętrznej.

Rozmiary: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46


Kolory:



134°C
STERYLIZACJA

90°C
MYCIE I
DEZYNFEKCJA

NOWY
KOLOR!

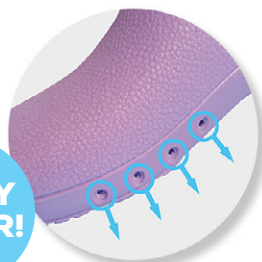

MEDEX-SRK

Barierowy fartuch operacyjny wielokrotnego użytku

(zgodny z normą PN-EN 13795 w zakresie standardowego ryzyka)



GWARANCJA
BARIEROWOŚCI

100
PRANIA I
STERYLIZACJI

Fartuch operacyjny do procedur operacyjnych **standardowego** ryzyka. Dzięki zastosowanym tkaninom Medex-SRK zapewnia najwyższy komfort użytkowania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.

Konstrukcja fartucha:

Strefa krytyczna: panel przedni i przedramiona wykonane z lekkiej tkaniny o składzie 99% poliestru z dodatkiem 1% włókna węglowego o podwyższonym poziomie nieprzemakalności.

Strefa mniej krytyczna: panel tylny, górna część klatki piersiowej i ramiona wykonane z tkaniny nieprzemakalnej bawełniano-poliestrowej.

Właściwości:

Bardzo wysoki komfort użytkowania, wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci, długa żywotność i wytrzymałość, brak pylenia, wysoki poziom komfortu dotykowego, wysoki poziom przepuszczalności powietrza w strefie mniej krytycznej. Nitka węglowa zapewnia właściwości antystatyczne. Medex-SRK utrzymuje poziom barierowości wymagany normą PN-EN 13795 przez 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji.

Możliwa jest personalizacja fartucha według wymagań klienta.

Rozmiary: M, L, XL, XXL

Kolory:



MEDEX-WRK

Barierowy fartuch operacyjny wielokrotnego użytku

(zgodny z normą PN-EN 13795 w zakresie wysokiego ryzyka)



GWARANCJA
BARIEROWOŚCI

50
PRANIA I
STERYLIZACJI

Fartuch operacyjny do procedur operacyjnych **wysokiego** ryzyka. Dzięki zastosowanym tkaninom Medex-WRK zapewnia najwyższy komfort użytkowania oraz maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Konstrukcja fartucha:

Strefa krytyczna: panel przedni i przedramiona wykonane z trójwarstwowego laminatu z membraną poliuretanową.

Strefa mniej krytyczna: panel tylny, górna część klatki piersiowej i ramiona wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej.

Właściwości:

Niska waga, ochrona przeciwko wirusom, brak pylenia, wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci w polu niekrytycznym, wysoki poziom przepuszczalności powietrza w strefie mniej krytycznej, zapewnia maksimum komfortu i bezpieczeństwa dla użytkowników. Medex-WRK utrzymuje poziom barierowości wymagany normą PN-EN 13795 przez 50 cykli prania, suszenia i sterylizacji.

Możliwa jest personalizacja fartucha według wymagań klienta.

Rozmiary: M, L, XL, XXL

Kolory:



MEDEX-EKO

Barierowy fartuch operacyjny wielokrotnego użytku



GWARANCJA
BARIEROWOŚCI

100
PRANIA I
STERYLIZACJI

Fartuch operacyjny do procedur operacyjnych **standardowego** ryzyka. Dzięki zastosowanym tkaninom Medex-EKO zapewnia najwyższy komfort użytkowania oraz wysoki poziom bezpieczeństwa w strefie krytycznej.

Konstrukcja fartucha:

Strefa krytyczna: panel przedni i przedramiona wykonane z lekkiej tkaniny o składzie: 99% poliester z dodatkiem 1% włókna węglowego o podwyższonym poziomie nieprzemakalności.

Strefa mniej krytyczna: panel tylny, górna część klatki piersiowej i ramiona wykonane z chłonnej tkaniny bawełniano-poliestrowej. Strefa mniej krytyczna spełnia wymagania normy PN-EN 13795 pod względem uwalniania cząstek oraz parametrów wytrzymałościowych.

Właściwości:

Niska waga, długa żywotność i wytrzymałość, brak pylenia, bardzo wysoki poziom odporności na przenikanie płynów w strefie krytycznej, wysoki poziom absorpcji i uwalniania wilgoci, bardzo wysoki poziom przepuszczalności powietrza w strefie mniej krytycznej. Nitka węglowa zapewnia właściwości antystatyczne. Medex-EKO utrzymuje w strefie krytycznej poziom barierowości wymagany normą PN-EN 13795 przez 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji.

Możliwa jest personalizacja fartucha według wymagań klienta.

Rozmiary: M, L, XL, XXL

Kolory:



AQUAFIL

Serwety wysokochłonne,
przemakalne, poliestrowe

Serwety typu Aquafil są serwetami chłonnymi wykonanymi z tkaniny poliestrowej o bardzo wysokiej gramaturze. Nicielnicowy splot tkaniny zapewnia dużą zdolność absorpcyjną. Serwety te przeznaczone są do zabezpieczania pacjenta podczas transportu na bloku operacyjnym. W celu lepszej kontroli płynów mogą być stosowane jako dodatkowa warstwa chłonna na powierzchni obłożenia, jak również mogą być stosowane do pozycjonowania pacjenta na stole operacyjnym. W związku z faktem, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na bloku operacyjnym nie mogą być stosowane tkaniny pyłące, nasze serwety są zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie uwalniania cząstek.

Przykładowe wymiary:

150x240 cm
150x200 cm
100x150 cm
75x90 cm
50x60 cm

Kolory:



BARIERTEX Standard


Serwety nieprzemakalne,
bawełniano-poliestrowe,
poliestrowe

Serwety pojedyncze Bariertex Standard wykonane z tkaniny bawełniano – poliestrowej lub poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego są serwetami nieprzemakalnymi, zgodnymi z normą PN-EN 13795. Serwety te przeznaczone są do zabezpieczania stolików narzędziowych, stołu operacyjnego oraz pacjenta w strefach mniej krytycznych podczas zabiegów standardowego i wysokiego ryzyka. Serwety zachowują swe właściwości barierowe przez okres 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji.

Przykładowe wymiary:

150x240 cm
150x200 cm
100x150 cm
75x90 cm
50x60 cm

Kolory:

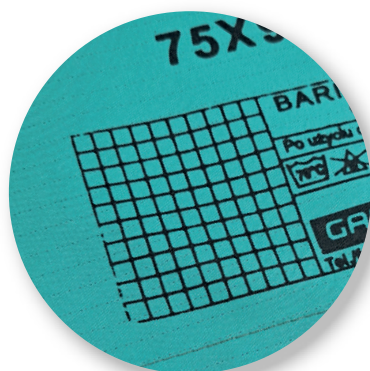

ZESTAWY OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH

ZESTAW BARIERTEX Standard

Serwety dwuwarstwowe z otworem są nieprzemakalne i chłonne wokół otworu. Spełniają normę PN-EN 13795 w zakresie standardowego ryzyka. Serwety stosowane są do zabezpieczania pola operacyjnego podczas drobnych zabiegów chirurgicznych. Zachowują swe właściwości barierowe przez okres 100 cykli prania, suszenia i sterylizacji (system znakowania cykli prania w postaci krętek użyć).


Przykładowe wymiary:

50x60 cm ø 6

75x90 cm ø 10

(istnieje możliwość zamówienia indywidualnych rozmiarów)

Kolory:

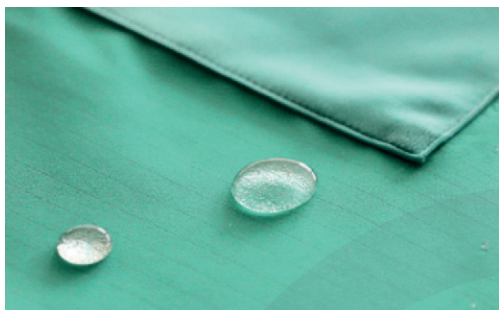

ZESTAW BARIERTEX Plus

Serwety zgodne z normą PN-EN 13795 dla wysokiego ryzyka. Stosowane jako obłożenia pacjenta podczas zabiegów operacyjnych wysokiego ryzyka (duża ilość wszelkiego typu płynów podczas zabiegu). Serwety wykonano na bazie dwóch tkanin. W strefie krytycznej z chłonnego trójwarstwowego laminatu oraz w strefie mniej krytycznej z nieprzemakalnej tkaniny poliestrowej.

Kolory:



ZESTAW SERWET uniwersalnych



Zestawy obłożeń operacyjnych wykonanych na bazie różnego typu tkanin: łączonych tkanin jednowarstwowych chłonnych z nieprzemakalnymi. Nasza firma oferuje obłożenia standardowego ryzyka, jak również wysokiego ryzyka zgodnie z normą PN-EN 13795.

Sposób mocowania serwet do ciała pacjenta może odbywać się na dwa sposoby: przy pomocy taśm lepnych bądź też opinaków tępych, które nie powodują uszkodzeń.

1. Taśma jednostronnie lepna, wodorozpuszczalna o wymiarze 10x50 cm

2. Łączenie serwet za pomocą tępych opinaków, wykonanych z nierdzewnej stali narzędziowej, matowych oznakowanych kodem Data Matrix o długości 10 cm

Kolory:

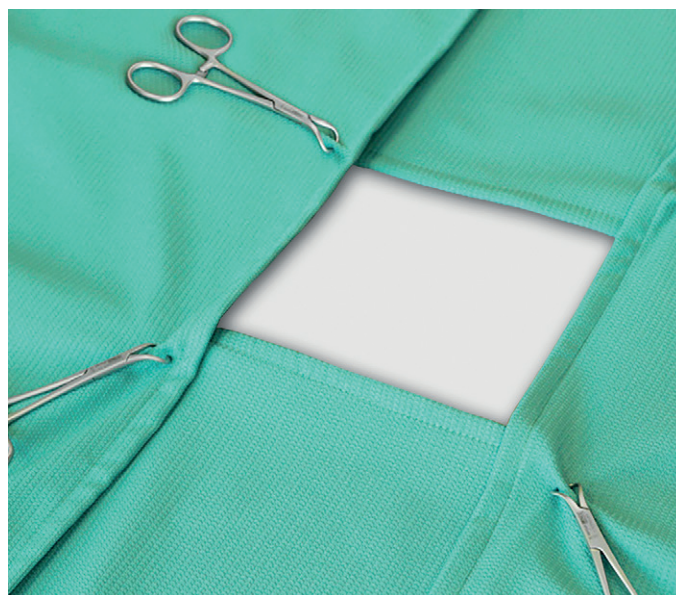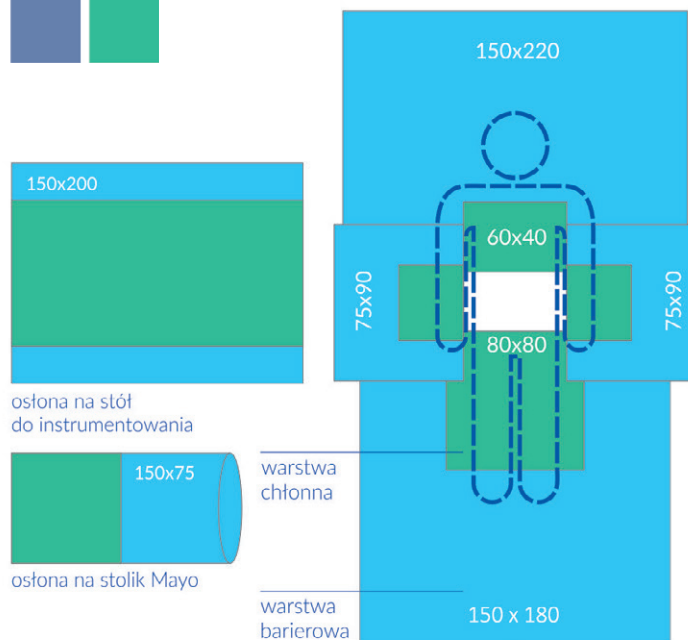

MEDIPROTEX

Odzież fasonowa

Odzież fasonowa Mediprotex to dobrze zaprojektowana uszyta odzież medyczna. Profesjonalny wygląd, prosta linia i wygoda, to cechy doceniane przez najbardziej wymagających klientów. Dzięki zastosowaniu tkaniny o właściwej mieszance poliestru i bawełny zapewnia doskonały poziom zarówno komfortu termofizjologicznego, jak i wytrzymałości zapewniającej długie użytkowanie.

Właściwości:

Odzież wykonana z tkaniny o optymalnej gramaturze stanowiącej kompromis między bardzo wysokim komfortem użytkowania, trwałością odzieży oraz kosztem jej serwisu. Bardzo niski poziom wykurczu i mechacenia oraz duża odporność na odbarwienia, brak pylenia, wysoki poziom komfortu dotykowego oraz wysoki poziom przepuszczalności powietrza.

Fasony damskie:

- bluza wkładana przez głowę
- fartuch lekarski z kołnierzem
- bluza rozpinana
- spodnie
- spódnica
- sukienka

Fasony męskie:

- bluza wkładana przez głowę
- fartuch lekarski z kołnierzem
- bluza rozpinana
- spodnie

Rozmiary: XS - 3XL, inne

Kolory:



Bazując na nowoczesnym wzornictwie, stworzyliśmy linię Mediprotex, która podkreśla sylwetkę, nadając jej elegancji i szyku

Każdy z modeli linii Mediprotex łączy zastosowanie organizera naszytego na kieszeni górnej oraz zastosowanie kieszeni dolnych naszytych pod kątem.





- ▶ **organizer**
na kieszeni górnej
- ▶ **ukośne kieszenie**
na dole każdego z modeli
linii Mediprotex Custom





Ubrania Mediprotex Custom charakteryzują się niskim poziomem kurczliwości i wysokim poziomem odporności na odbarwienia.



Szeroka paleta kolorów pozwala na dedykowanie ubrań do poszczególnych oddziałów i ułatwia ich rozróżnienie nawet u największych klientów.

KOSZULE dla pacjentów

Bielizna wielokrotnego użytku

Koszule dla pacjentów wykonane są z tkaniny bawełniano - poliestrowej. Zapewniają wysoki poziom absorpcji oraz uwalniania wilgoci, wysoki poziom przepuszczalności powietrza oraz maksimum komfortu dla użytkownika. Konstrukcja koszul zapewnia bardzo łatwe zakładanie i zdejmowanie z pacjenta nawet w pozycji leżącej.

Koszula K-01 przeznaczona dla pacjentów. Tyłne poły zachodzące na siebie zapewniają maksimum intymności dla pacjenta.

Koszula K-02 przeznaczona dla pacjentów bloku operacyjnego oraz OIOM. Dodatkowe napy wzdłuż rękawa typu reglan umożliwiają zdjęcie koszuli z leżącego pacjenta, nawet w przypadku, gdy ma on założone wkłucie promieniowe na lewym czy też prawym ramieniu.

Koszula K-03 przeznaczona dla kobiet w ciąży i położnic. Bez rozcięcia z tyłu. Rękaw 7/8, rozcięcie na piersiach, wiązane trokami.

Rozmiary: rekomendowany uniwersalny M/L i XL/XXL
(możliwość zamówienia w innych rozmiarach)

Kolory:



PIŻAMY dla pacjentów

Bielizna wielokrotnego użytku

Piżamy dla pacjentów wykonane są z tkaniny bawełniano - poliestrowej. Zapewniają wysoki poziom absorpcji oraz uwalniania wilgoci, wysoki poziom przepuszczalności powietrza oraz maksimum komfortu dla użytkownika.

Rozmiary: S-2XL

Kolory:





POŚCIEL w prążki T1

Pościel szpitalna wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej z wtkanymi prążkami kolorowej przędzy, dla klientów poszukujących innych rozwiązań niż tradycyjna pościel w kolorze białym. Inny wzór prążków na poszewce i poszwie ułatwia szybką identyfikację asortymentu. Pościel charakteryzuje się niskim poziomem kurczliwości i mechacenia, dużą odpornością na odbarwienia, jak również wytrzymałością na rozerwanie i deformację.

Wymiary: Poszwa: 160x210, Poszewka: 70x80 (inne według wymagań klienta)



Możliwość **trwałego oznaczenia nadrukiem** metodą sublimacji wysokotemperaturowej



POŚCIEL biała T2

Pościel szpitalna wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej zgodnie z normą CEN/TS 14237 (tekstylna systemie ochrony zdrowia).

Właściwości:

Atutem pościeli mieszankowej jest zawartość przędzy poliestrowej, która będąc bardziej wytrzymałą od przędzy bawełnianej, wydłuża żywotność pościeli o 20%. Tkaniny mieszankowe charakteryzują się niskim poziomem pylenia, które jest istotne z punktu widzenia epidemiologii, ponieważ redukuje ryzyko zakażeń szpitalnych.

Poszwa i poszewka posiadają wewnętrzną zakładkę, zapobiegającą wypadaniu poduszki, koca lub kołdry.

Wymiary:

Poszwa: 160x210 cm
Poszewka: 70x80 cm
Prześcieradło: 160x250 cm
(inne według wymagań klienta)

Kolory:



Możliwość **trwałego oznaczenia nadrukiem** metodą sublimacji wysokotemperaturowej



POŚCIEL dla dzieci T3

Wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej z nadrukiem w motywy przyrodnicze dla młodszych pacjentów szpitali. Atrakcyjne wzornictwo oraz pastelowe kolory tkanin umiłą pobyt w szpitalu każdemu dziecku. Pościel charakteryzuje się niskim poziomem kurczliwości i mechacenia, dużą odpornością na odbarwienia oraz wytrzymałością na rozerwania i deformacje.

Wymiary:

Poszewka: 70x70 cm, 80x70 cm

Poszwa: 70x170 cm

(inne według wymagań klienta)

Kolory:



KOC poliestrowy

Koc wykonany z przędzy w 100% poliestrowej, spełni wymagania najbardziej wymagających klientów.

Właściwości:

Miły w dotyku, o wysokiej gramaturze koc zapewnia utrzymanie odpowiedniego komfortu termicznego. Zachowuje swoje właściwości i wymiary, będąc prany wielokrotnie nawet w warunkach pralni przemysłowych. Koc charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i odbarwienia.

Wymiary: 150x200 cm

Kolory:



PODKŁAD membranowy U1

Podkład U1 to praktyczne rozwiązanie mające na celu ochronę pacjenta, pościeli i materaca. Podkład chroni pościel i materac przed zabrudzeniami.

Właściwości:

Dzięki wielowarstwowej konstrukcji, na którą składają się zewnętrzne warstwy z tkaniny poliestrowej, wewnętrznej warstwy poliestru/rayonu i membrany poliuretanowej, podkład U1 spełnia kilka zadań. Wewnętrzna warstwa z domieszką sztucznego jedwabiu ma doskonałe właściwości absorpcyjne, dzięki czemu podkład chłonie jak gąbka. Membrana poliuretanowa chroni przed przenikaniem płynów w kierunku łóżka i pościeli, a także chroni przed przenikaniem mikroorganizmów w kierunku pacjenta.

Dzięki użyciu podkładu, oprócz komfortu pacjenta i zabezpieczenia epidemiologicznego, szpital oszczędza na kosztach prania. Podkład posiada skrzydełka po obu stronach, które zawinięte pod materac unieruchamiają podkład.

Wymiary: 85x90 cm
szerokość skrzydełka: 45 cm

Kolory:



Możliwość **trwałego oznaczenia nadrukiem** metodą sublimacji wysokotemperaturowej



PRZEŚCIERADŁO elastyczne na materac

Prześcieradło elastyczne stanowi alternatywę dla tradycyjnego prześcieradła, ułatwiając i znacząco przyspieszając uzbrojenie materaca szpitalnego. Posiada zakład po całym obwodzie z obszytą wzdłuż krawędzi gumką, co służy podwinięciu pod materac.

Właściwości:

Prześcieradło wykonane jest z elastycznej dzianiny poliestrowo-bawełnianej, z fakturą w kształcie ziaren kukurydzy.

Wymiary: 100x200 cm

Kolory:





POKROWIEC na materac, kołdrę i poduszkę

Wykonany z tkaniny o gramaturze 135g/m² i składzie 100% poliester, powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02 mm. Pokrowiec na materac zapinany jest na zamek z dwóch stron lub na gumkę po obwodzie. W przypadku poduszki zapinany jest zamek po krótszym boku. Sposób ten ułatwia zakładanie i zdejmowanie pokrowców.

Właściwości:

Pokrowiec zabezpiecza materac przed zabrudzeniami i przenikaniem czynników zakaźnych. Warstwa wierzchnia zapewnia pacjentom bardzo wysoki komfort. Pokrowiec może być wykonany w dowolnym rozmiarze.

Wymiary: pokrowiec na poduszkę: 70x80 cm (z zamkiem po krótszym boku)
pokrowiec na kołdrę: 160x200 cm (z zamkiem po krótszym boku)
pokrowiec na materac: 12x90x200 cm (zamek w kształcie litery "L")

Kolory:





WORKI na bieliznę

Worki do zbiórki brudnej bielizny

Worki przeznaczone do zbiórki brudnej bielizny szpitalnej. Wykonywane na zamówienia klienta, z dwóch różnych materiałów: mieszanki bawełniano -poliestrowej lub poliestrowej z nitką węglową. Obydwa materiały cechuje odporność na uszkodzenia mechaniczne, muszą cechować się wytrzymałością co najmniej 220kg/m².

Worki posiadają wszyty tunel z trokiem do zaciągania, jednak z uwagi na różne zapotrzebowanie szpitali oraz pralni jesteśmy w stanie wykonać ten asortyment na indywidualne zamówienia klienta.

Rozmiary: 120 x 70 cm

Kolory:



WARUNKI PRANIA I STERYLIZACJI

dla wyrobów barierowych GARMEX

Instrukcja używania musi być przestrzegana żeby utrzymać właściwości tkanin.
Wszystkie nowe wyroby muszą być wyprane przed pierwszym użyciem.



1. PRANIE

- maksymalny załadunek 70%
- moduł kąpieli piorącej minimum 1:4
- płukanie wstępne: woda zimna, czas 6 min
- pranie wstępne temp. 35-50°C, czas 5-10 min, pH < 10,5
- pranie zasadnicze temp. 65-75°C, czas 20 min, pH < 10,5
- schładzanie temp. 40°C
- płukanie 3x3 min
- zakwaszanie do pH 5,5



2. WIROWANIE

- wirowanie 400 obr./min, czas 4 min
- wirowanie na maksymalnie niskich obrotach max 400 obr./min



3. SUSZENIE

- suszyć w suszarce bębnowej w 80°C przez 10-12 min (lub więcej w razie potrzeby)
- suszenie w tunelu finisz:er
- ciśnienie pary rozpylonej - 1,0
- wydajność: prędkość przepływu bielizny przez finisz:er 1000 szt./godz
- temperatura modułu I - 150°C
- ilość powietrza % wsadu I = 100
- temperatura modułu - 145°C
- ilość powietrza % - 100
- temperatura modułu III - 0°C



4. STERYLIZACJA

- fartuch operacyjny i serwety przed użyciem muszą być wysterylizowane metodą parową w autoklawie
- sterylizować w autoklawie parowym w temp. 134°C +/-1°C przez 5-7 min, lub w 121°C przez 15 min
- nie używać metalowych kontenerów



5. PRASOWANIE

Dotyczy tylko odzieży operacyjnej:

- prasowanie w temperaturze do 150°C
- NIE PRASOWAĆ FARTUCHÓW I SERWET!
- NIE MAGLOWAĆ!



6. OSTRZEŻENIA

- maksymalne pH kąpieli piorącej: 10,5
- nie stosować detergentów zawierających chlorowe wybielacze
- nie prać fartuchów i serwet barierowych w tunelach pralniczych wyposażonych w prasę
- nie przeładowywać pralek i suszarek
- należy regularnie dokonywać przeglądu pralek i suszarek, w celu upewnienia się czy ich elementy nie posiadają żadnych szorstkich miejsc, które mogłyby zniszczyć tkaninę.
- **UWAGA:** po każdym użyciu, należy odznaczyć (niezmywalnym pisakiem) kolejno jedną ze stu kratek monitorujących cykle użycia (w przypadku wyrobów barierowych) na które wytwórca daje gwarancję.



IGNATKI 40B, 16-001 KLEOSIN

TEL. +48 85 663 03 14

WWW.GARMEX.PL

E-MAIL: SEKRETARIAT@GARMEX.PL