

 KIKGEL


BurnTec[®]

FIRST AID FOR BURNS



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Opatrunki hydrożelowe BurnTec® są zbudowane z naturalnych i syntetycznych polimerów oraz wody (jakości farmakopealnej) usieciowanych za pomocą wiązki elektronów. Polimery te tworzą trwałą, przestrzenną sieć pozwalającą na kumulację cząsteczek wody, dzięki czemu opatrunek hydrożelowy posiada także zdolności absorpcyjne. Formę użytkową stanowi wytrzymały, stabilny (a nie płynny) płat hydrożelu o grubości ok. 3,5 mm. By zapewnić całkowitą wytrzymałość mechaniczną, hydrożel został wzmocniony na całej swojej powierzchni włókniną o jakości medycznej, której marginesy ułatwiają wyjęcie opatrunku z foremki oraz umożliwiają jego łatwą i szybką aplikację. Opatrunki hydrożelowe są elastyczne i łatwe w formowaniu, dobrze przylegają do ciała.

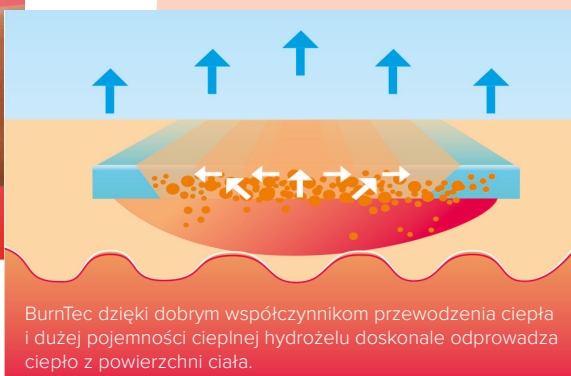


- wytrzymały płat hydrożelu gwarantuje równomierny jego rozkład na całej ranie
- chłodzi miejsce urazu oraz zapewnia kojące działanie do 24 godzin
- posiada właściwości absorpcyjne - wysięk wraz z toksynami jest zatrzymywany w żelu
- jest przepuszczalny dla powietrza, lecz nie dla bakterii - chroni przed zakażeniem
- hydrożel zapewnia optymalne wilgotne środowisko - przyspiesza naskórkowanie
- jest elastyczny i miękki - dobrze przylega oraz dopasowuje się do kształtów ciała
- Nie przywiera do rany, dzięki czemu zmiana opatrunku jest bezbolesna dla pacjenta
- Natychmiastowe zastosowanie opatrunku zmniejsza ryzyko powstawania blizn przerostowych
- jest biozgodny, nie powoduje uczuleń



Zastosowanie

BurnTec® jest nowoczesnym opatrunkiem stosowanym w następujących przypadkach:

- 🔴 oparzenia I, II i III stopnia (termiczne, chemiczne, elektryczne)
- 🔴 oparzenia słoneczne
- 🔴 otarcia (w tym głębokie) i podrażnienia naskórka
- 🔴 stłuczenia i opuchlizny (ukąszenia)

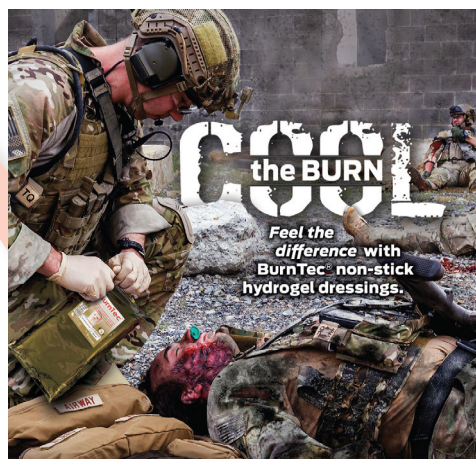


BurnTec® sprawdzony w boju, znajduje zastosowanie w:

- 🔴 służbach wojskowych
- 🔴 ratownictwie medycznym
- 🔴 straży pożarnej
- 🔴 policji
- 🔴 medycznym wsparciu sportowców
- 🔴 zakładach pracy
- 🔴 innych służbach ratowniczych, jak TOPR, GOPR, WOPR itp.

BurnTec®
FIRST AID FOR BURNS

Sposób użycia opatrunku

- 🔴 rozerwać ochronną zewnętrzną i foliową wewnętrzną torebkę
- 🔴 złapać za margines włókniny i wyjąć opatrunek z foremki - cienki listek foliowy przykrywający opatrunek ułatwia jego wyjęcie i dlatego nie powinien być on od razu usuwany
- 🔴 położyć opatrunek na ranie i usunąć listek foliowy
- 🔴 dodatkowo umocować opatrunek bandażem, przylepcem lub siatką elastyczną
- 🔴 opatrunek utrzymywać na ranie do 24 godzin

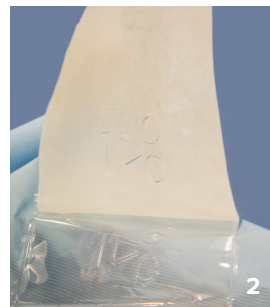

Firma KIKGEL produkuje opatrunki hydrożelowe od ponad 30 lat. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wiedzy technicznej, a także wdrożonemu systemowi zarządzania jakością według normy ISO 13485 oferujemy produkty, które spełniają międzynarodowe standardy. Opatrunki są oznaczone znakiem CE oraz posiadają aprobatę FDA, natomiast nowoczesna technologia produkcji została wyróżniona na wielu wystawach innowacyjności.



42. Światowa Wystawa
Wynalazków Eureka
w Brukseli - złoty medal




Wystawa Wynalazków
Iena 95 w Norymberdze
- srebrny medal



Międzynarodowa
Wystawa GENIUS 96
w Budapeszcie
- brązowy medal

Opatrunki **BurnTec** dostępne są
w szerokiej gamie rozmiarów

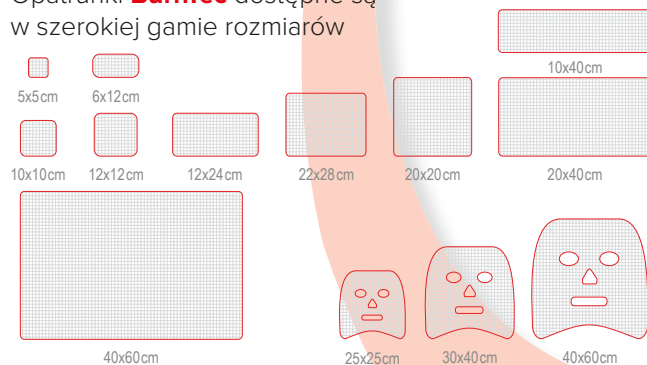

KIKGEL

KIKGEL Sp. z o.o.

ul. M. Curie-Skłodowskiej 7
97-225 Ujazd
tel.: 44 719 23 40
e-mail: biuro@kikgel.com.pl

www.kikgel.com.pl

